


ANWENDUNGSHINWEISE*

NEMLUVIO®

NEMLUVIO® - Fertigpen


Ihnen wurde das Arzneimittel NEMLUVIO® zur Behandlung ihrer Hauterkrankung verordnet. Anbei finden Sie einige Hinweise zur sicheren Anwendung. Weitere Informationen finden sich in der Packungsbeilage, die dem Arzneimittel beiliegt.

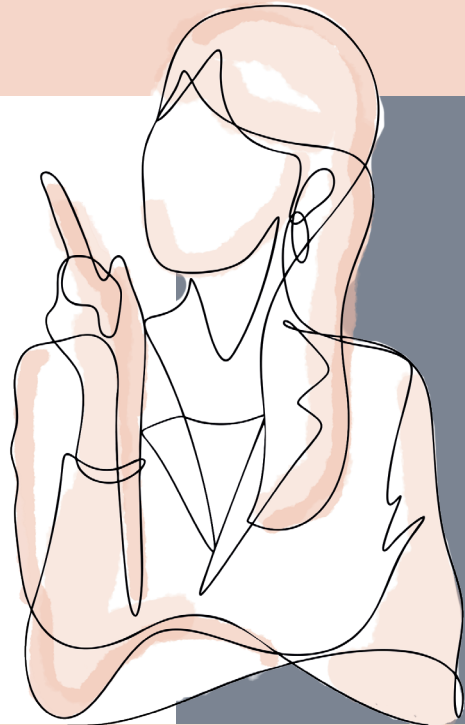

Wichtige Informationen

Was sollten Sie vor der Anwendung beachten?

- Lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam durch, bevor Sie den NEMLUVIO®-Fertigpen verwenden.
- **Tragen Sie die Termine** im Voraus **in Ihren Kalender ein**, die Sie daran erinnern, wann NEMLUVIO® anzuwenden ist.
- Befolgen Sie alle Schritte genau wie beschrieben. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie die richtige Dosis des Arzneimittels erhalten.
- Sie dürfen den NEMLUVIO®-Fertigpen **nicht verwenden**, wenn er auf eine harte Oberfläche gefallen ist oder beschädigt, gesprungen oder gebrochen ist.

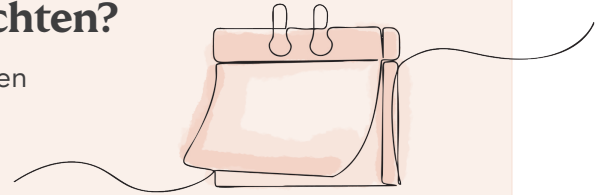

Hinweise zur Aufbewahrung


- **Bewahren Sie den NEMLUVIO®-Fertigpen und alle Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.**
- Lagern Sie den NEMLUVIO®-Fertigpen im Kühlschrank bei 2°C bis 8°C.
- Den Nemluvio®-Fertigpen nicht einfrieren.
- Bewahren Sie den NEMLUVIO®-Fertigpen in der Originalverpackung auf, um den Inhalt vor Licht zu schützen.
- Der NEMLUVIO®-Fertigpen kann in der Originalverpackung für einen einmaligen Zeitraum von bis zu 90 Tagen bei Raumtemperatur bis zu 25°C aufbewahrt werden. Notieren Sie das Datum der Entnahme aus dem Kühlschrank auf dem Umkarton und verwenden Sie NEMLUVIO® innerhalb von 90 Tagen.
- NEMLUVIO® darf **nicht** angewendet werden, wenn das Verfalldatum überschritten ist oder wenn mehr als 90 Tage nach dem Datum, an dem es aus dem Kühlschrank genommen wurde, verstrichen sind (je nachdem, was früher eintritt).
- Nach erfolgter Aufbereitung muss NEMLUVIO® innerhalb von 4 Stunden verwendet werden.

* Anwendungshinweise ersetzen nicht die behördlich genehmigten Fach- und Gebrauchsinformationen in der jeweils aktuell gültigen Fassung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder an Ihre Apotheke.


Produktansicht NEMLUVIO®

Zweikammer-Fertigpen

VOR GEBRAUCH

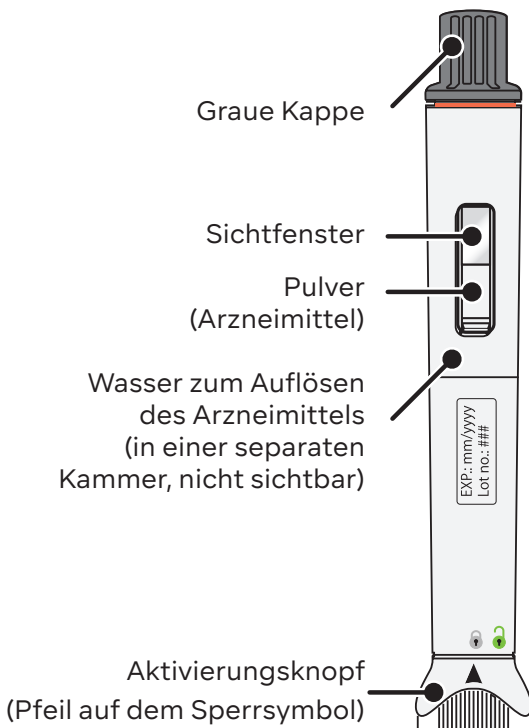

NACH GEBRAUCH

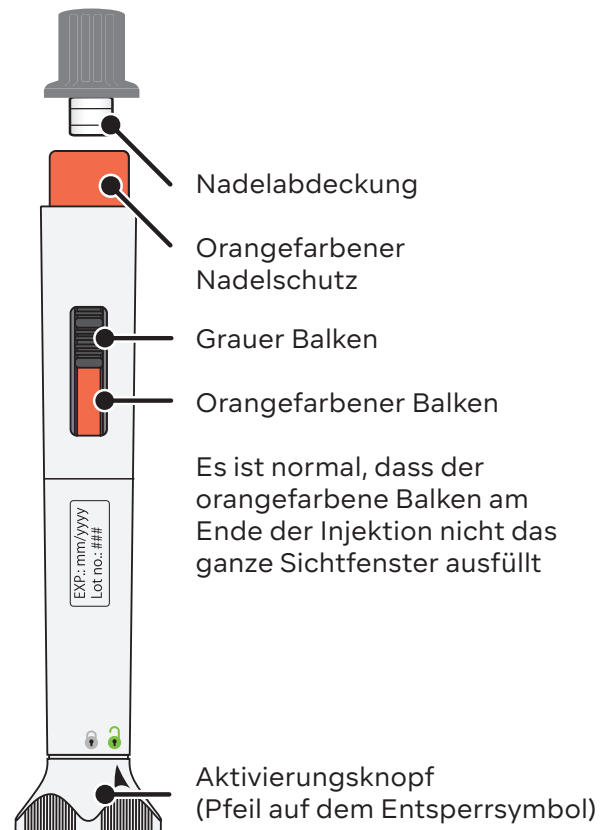

Vorbereitung der Injektion

1. Warten Sie, bis NEMLUVIO® Raumtemperatur erreicht hat

Nehmen Sie den NEMLUVIO®-Karton aus dem Kühlschrank und lassen Sie ihn Raumtemperatur annehmen – etwa 30 bis 45 Minuten.

2. Waschen Sie Ihre Hände mit Seife und trocknen Sie sie gründlich ab

3. Legen Sie alle Utensilien bereit

Nehmen Sie den Fertigen aus dem Karton und legen Sie Folgendes auf eine saubere, ebene und gut beleuchtete Fläche:


- Fertigen mit Arzneimittel
- Alkoholtupfer**
- Gazetupfer oder Wattebäusche**
- einen Entsorgungsbehälter für scharfe/spitze Gegenstände**



** Artikel, die nicht im Umkarton enthalten sind


4. Prüfen Sie den NEMLUVIO®-Fertigen, um Folgendes sicherzustellen

- Das Verfalldatum ist **nicht** überschritten.
- Das Pulver ist weiß und **nicht** gelöst.
- Der NEMLUVIO®-Fertigen wurde **nicht** fallen gelassen und ist **nicht** beschädigt oder gesprungen.

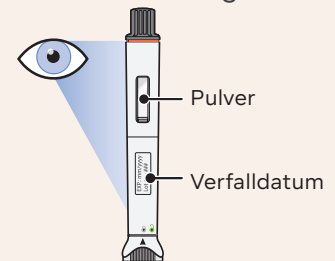


5. Aktivieren Sie den NEMLUVIO®-Fertigen

Halten Sie den Fertigen aufrecht und drehen Sie den Aktivierungsknopf bis zum Anschlag nach rechts. Die Einleitung des Wassers in die Pulverkammer wird dadurch in Gang gesetzt.

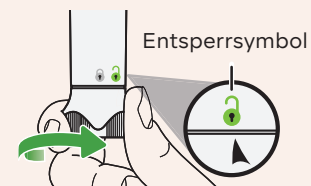

6. Warten Sie, bis der graue Balken zum Stillstand kommt

Den NEMLUVIO®-Fertipen nicht schütteln, bevor der graue Balken vollständig zum Stillstand gekommen ist, um eine genaue Dosierung zu ermöglichen.

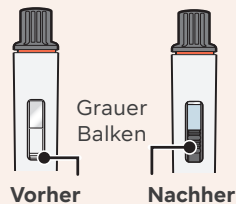

7. Schütteln Sie den Fertipen, damit sich das Arzneimittel auflöst



8. Warten Sie mindestens 5 Minuten, bis eventuell vorhandene Bläschen weniger werden und das Pulver vollständig aufgelöst ist

Hinweis:

Wenn sich das Arzneimittel nicht vollständig aufgelöst hat, schütteln Sie nochmals 30 Sekunden und warten dann 5 Minuten.




9. Prüfen Sie das Arzneimittel im Sichtfenster

Prüfen Sie, ob das gelöste Arzneimittel:

- klar und farblos bis leicht gelblich ist,
- keine Schwebstoffe enthält.

Nach dem Auflösen:

Verwendung innerhalb von 4 Stunden, Aufbewahrung bei Raumtemperatur (bis zu 25°C).

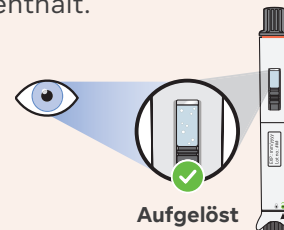

Injektion von NEMLUVIO®

10. Wählen Sie eine Injektionsstelle


Selbstinjektion

- Bauchbereich, mind. 5 cm vom Nabel entfernt
- Oberschenkel



Injektion durch Pflegepersonal

- Bauchbereich, mind. 5 cm vom Nabel entfernt
- Oberschenkel
- Äußerer, oberer Arm

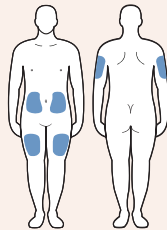

11. Reinigen Sie die Injektionsstelle

- Benutzen Sie bei jeder Injektion einen neuen Alkoholtupfer.
- Lassen Sie dann die Haut an der Luft trocknen.
- Berühren Sie die Injektionsstelle jetzt nicht mehr.



Alkoholtupfer

12. Drehen Sie die graue Kappe ab, um den Nadelschutz freizulegen

Nicht an der grauen Kappe ziehen



- Halten Sie den Fertigenpen aufrecht, um ein Auslaufen zu vermeiden.



- Schrauben Sie die graue Kappe ab, bis der orange-farbene Nadelschutz erscheint.



- Ziehen Sie die Kappe vorsichtig vom orange-farbenen Nadelschutz ab.




Anwendungsvideo


Scannen Sie diesen QR-Code und sehen Sie sich das Anwendungs-video in Ruhe an.

13. Injektion des Arzneimittels


- Setzen Sie den NEMLUVIO®-Fertipen senkrecht auf die Injektionsstelle, sodass der orangefarbene Nadelschutz flach auf der Haut aufliegt.

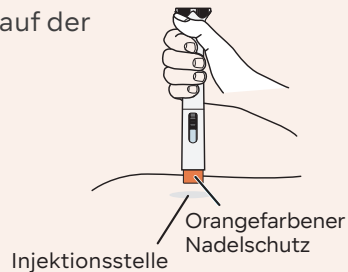


- Drücken Sie den NEMLUVIO®-Fertipen vorsichtig nach unten, bis der orangefarbene Nadelschutz vollständig hineingedrückt ist. Die Injektion beginnt sofort mit einem Klick. Der orangefarbene und der graue Balken sollten sich bewegen. Drücken Sie den NEMLUVIO®-Fertipen **mind. 15 Sekunden** nach unten.

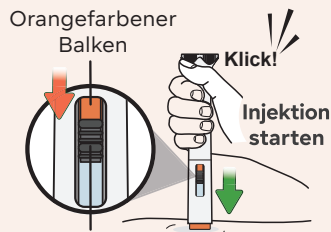

Den orangefarbenen Nadelschutz nach unten drücken

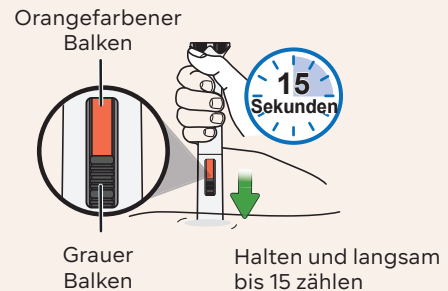

- Vergewissern Sie sich im Sichtfenster, dass der orangefarbene und der graue Balken zum Stillstand gekommen sind. Das bedeutet, dass die Injektion abgeschlossen ist.
- Heben Sie den Fertipen gerade von Ihrer Haut ab. Der orangefarbene Nadelschutz rastet ein und deckt die Nadel ab.
- Entsorgen Sie den gebrauchten Fertipen und die graue Kappe sofort nach Gebrauch in einem Entsorgungsbehälter für scharfe/spitze Gegenstände. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Nadel.

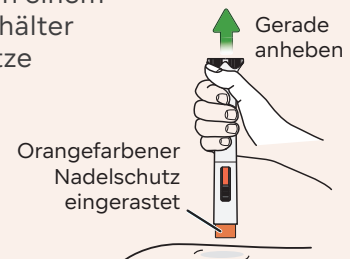

Noch mehr Informationen finden Sie auf
www.leidsymptom.de/gps

GPS[★]

GALDERMA PATIENT SERVICES

Galderma Laboratorium GmbH, Toulouser Allee 23a, 40211 Düsseldorf, Germany
Tel.: 0 211 / 5 86 01 00, Fax: 0 211 / 5 86 01 01, E-Mail: patientenservice@galderma.com